

# 春のフレッツシヤーズフェア



NGS サンプルの定量は蛍光法で正確・迅速・簡単に!

## Quantus™ NGS Starter Package

カタログ番号 通常価格  
E5150 ¥193,000

→ **¥125,000** (税抜き)

### お得なセット

#### 小型フルオロメーター

#### Quantus™ Fluorometer

(カタログ番号 E6150)

ストレスゼロ!  
操作がシンプル

簡単!  
シングルポイント  
キャリブレーション

在庫あり!  
今なら即納

- [仕様]
- 幅 11.5 × 奥行 22.7 × 高さ 4.5 cm、重量 400 g
  - 検出波長: Blue (Ex. 495 nm/Em. 510-580 nm)、Red (Ex. 640 nm/Em. 660-720 nm)
  - 検出容器: 0.5ml PCR チューブ (推奨品: カタログ番号 E4941)



◀日本語マニュアル完備

#### DNA 測定用蛍光試薬

#### QuantiFluor® ONE dsDNA System

(カタログ番号 E4870、500 回分)

- 二本鎖 DNA に結合する蛍光色素 (Ex: 504 nm/Em. 531nm)
- スタンダード DNA 付属 (Lambda DNA)
- 希釈は不要、そのままサンプルと混合するだけ

#### dsDNA 測定試薬比較

QuantiFluor® ONE dsDNA System

感度

0.2-400

他社蛍光試薬 (低濃度用)

0.2-100

他社蛍光試薬 (高濃度用)

2-1000

検出できる DNA サンプル濃度 (ng/μl) \*

\* サンプル 1 μl を使用した場合



#### 測定用

#### 0.5ml PCR チューブ

(カタログ番号 E4941 50個×10パック)

サンプル、試薬を混合

DNA サンプル

QuantiFluor® ONE dsDNA Dye

5分 インキュベート

0.5ml PCR チューブ

Quantus™ で測定



プレートリーダーで一気読み

蛍光測定可能なプレートリーダーなら、96 ウェルプレートで一気に濃度測定できます。



GloMax® Discover

プロメガクラブなら

最高機種 **GloMax® Discover** を無償お貸出し!

プロメガクラブ詳細は

[プロメガクラブ](#) [検索](#)

基本の使い方



# 試薬と吸引装置一式の超お得なセット

## プラスミド抽出試薬 & ポンプセット

時短

簡単

便利

\*価格は税抜き表示です

吸引装置：¥51,000



ポンプ：¥90,000

試薬+小物：¥37,000

全部  
セットで!

カタログ番号 JKC005

価格 ¥178,000

特価

¥80,000


試薬は PureYield™ Plasmid Midiprep System (4 回分)、  
PureYield™ Plasmid Maxiprep System (2 回分)、  
その他吸引装置用小物 Eluator™ Vacuum Elution Device (4 個) が含まれます。

### ポンプセットで使える! 吸引法対応の試薬もおトク!


抽出スケール	製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格 (¥)	特別価格 (¥)	1 回の価格 (¥)
Maxi	PureYield™ Plasmid Maxiprep System	A2392	10 回分	29,000	20,300	2,030
		A2393	25 回分	68,000	47,600	1,904
Midi	PureYield™ Plasmid Midiprep System	A2492	25 回分	32,000	20,800	832
		A2496	300 回分	280,000	196,000	653
Mini	Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System	A1330	50 回分	14,000	9,100	182
		A1465	1,000 回分	180,000	102,000	102

核酸精製カラム内の溶液を専用の吸引装置で吸引して素早く抜き取るため、**時短効果**があります。

汎用機器である**遠心機**の占有時間もカットでき、他の実験もスムーズになります。

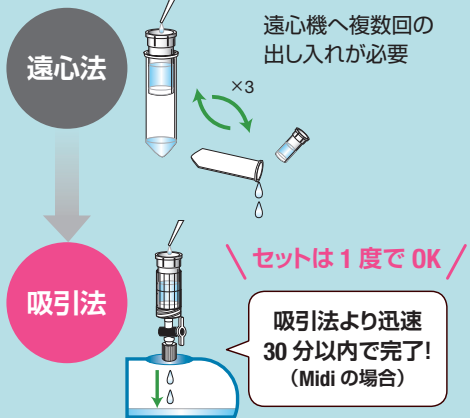

遠心や重力落下では時間がかかる Midi や Maxi は、特に吸引法が有効

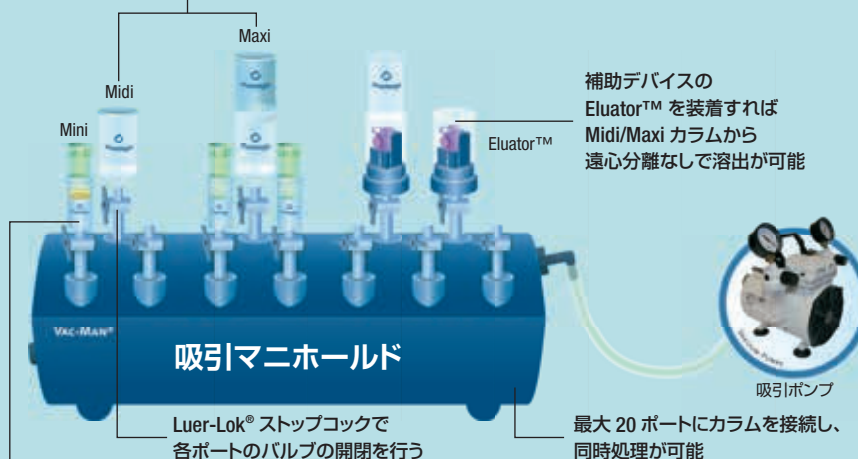

バキュームアダプター (カタログ番号 A1331) を装着すれば、Wizard® SV Gel and PCR Clean Up などミニカラムタイプを接続することもできます (本セットには付属しません)。

春のフレッシュアズフェア 詳細はこちらから → [www.promega.co.jp/freshers2022/](http://www.promega.co.jp/freshers2022/)



日本語 Web site : [www.promega.co.jp](http://www.promega.co.jp)

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 / Fax. 03-3669-7982 • E-Mail : [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)

## プロメガ株式会社

本社 〒103-0001  
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通  
Tel. 03-3669-7981 / Fax. 03-3669-7982

大阪事務所 〒532-0011  
大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル704号室  
Tel. 06-6390-7051 / Fax. 06-6390-7052

\*製品の仕様、価格については2022年4月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店