

RNA抽出キット 新発売 キャンペーン

キャンペーン期間：9月25日受注分まで

まとめて
キャッチ

細胞も組織も
これひとつ

さまざまなサンプルから total RNA が精製できるキット

ReliaPrep™ RNA Miniprep System


- ✓ 微量サンプル（細胞なら 100 個、組織なら 0.25 mg）から RNA を精製
- ✓ エタノール沈殿、フェノール / クロロホルム不要
- ✓ 最少 7 μ l で溶出可能
- ✓ 精製した RNA は RT-qPCR やシーケンシングなど一般的な用途に

対応サンプル例

- ・ 動物培養細胞
- ・ 植物組織*
- ・ 血液*
- ・ TRIzol 溶解物
- ・ 動物組織
- ・ 微生物*
- ・ 3D 培養

*詳細はテクニカルサービスにお問合せください。

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格(¥)
ReliaPrep™ RNA Miniprep System	Z6014	50 回分	54,000	➡ 38,000
	Z6015	250 回分	212,000	➡ 149,000

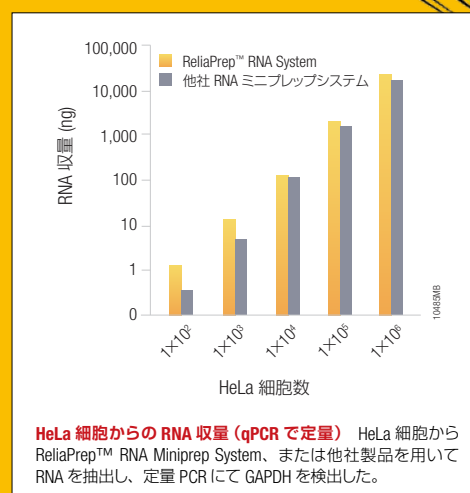

旧製品 * をお使いの方へ
*ReliaPrep™ RNA Cell/
Tissue Miniprep System



取ったら守る!

**サンプルの
長期保存に最適**

RT-PCR、cDNA 合成、
マイクロアレイ、
in vitro 転写 / 翻訳などに

**70℃、15 分間の
処理でも安定**

RNase との複合体は
熱に対して安定。
逆転写反応前に添加して
反応中の RNA を効果的に保護

**RNase A、B、C、
ヒト胎盤 RNase を
阻害**


哺乳類由来の
リコンビナントタンパク質です

耐熱性・酸化耐性のある RNase 阻害剤

RNasin® Plus RNase Inhibitor

※この製品には、動物由来成分フリーの cGMP グレード製品もございます。お求めの際は弊社テクニカルサービスにお問合せください。

製品名	カタログ番号	サイズ	通常価格	特別価格(¥)
RNasin® Plus RNase Inhibitor	N2611	2500 units	32,000	➡ 16,500
	N2615	10000 units	64,000	➡ 46,700

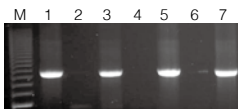

	M	1	2	3	4	5	6	7
Unheated RNasin® Plus		+	-	+	-	+	-	+
Heated RNasin® Plus		-	-	-	+	-	+	-
Unheated RNase A		-	+	+	+	-	-	-
Heated RNase A		-	-	-	-	+	+	-

RNasin® Plus と RNase A を組み合わせることで、RT-PCR 前のテンプレートを保護できる 1 µg の RNA テンプレートに、未加熱の RNasin® Plus 1 µl (40 ユニット)、未加熱の RNase A 2 µl (20 ng)、加熱済み RNasin® Plus 1 µl、または加熱済み RNase A 2 µl を、図に示すとおり組み合わせた。レーン 7 では、未加熱の RNasin® Plus 1 µl と未加熱の RNase A 2 µl を混合した後、70℃で 15 分間加熱した。調製した反応液 5 µl をテンプレートとして RT-PCR に使用した。レーン M は 200 bp DNA Step Ladder (カタログ番号 G6961)。



製品詳細はこちら



本キャンペーンの価格でいつでも購入したい方に

プロメガクラブへのご登録をおすすめします!

プロメガクラブとは、ご登録いただくだけで様々な特典が受けられる、プロメガユーザーのための会員サービスです(無料)。

特典

プロメガクラブ特別価格

ReliaPrep™ RNA Miniprep も RNasin® Plus も、いつでも本キャンペーンと同じ価格でご提供!

さらに!

ReliaPrep™ RNA Miniprep のミニカラムが単品購入できます



その他の特典、詳細はガイドブック、またはホームページをご覧ください。▶

詳しくはこちら



日本語 Web site : www.promega.co.jp

テクニカルサービス • Tel. 03-3669-7980 • E-Mail : prometec@jp.promega.com

プロメガ株式会社

本社 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通ビル 7F
Tel. 03-3669-7981

大阪事務所 〒541-0051
大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング
Tel. 06-6202-4581

※製品の仕様、価格については 2026 年 7 月現在のものであり予告なしに変更することがあります。

販売店